


## Rastreador ocular TOBII EYE TRACKER 4C e 5 e o software OPTKEY

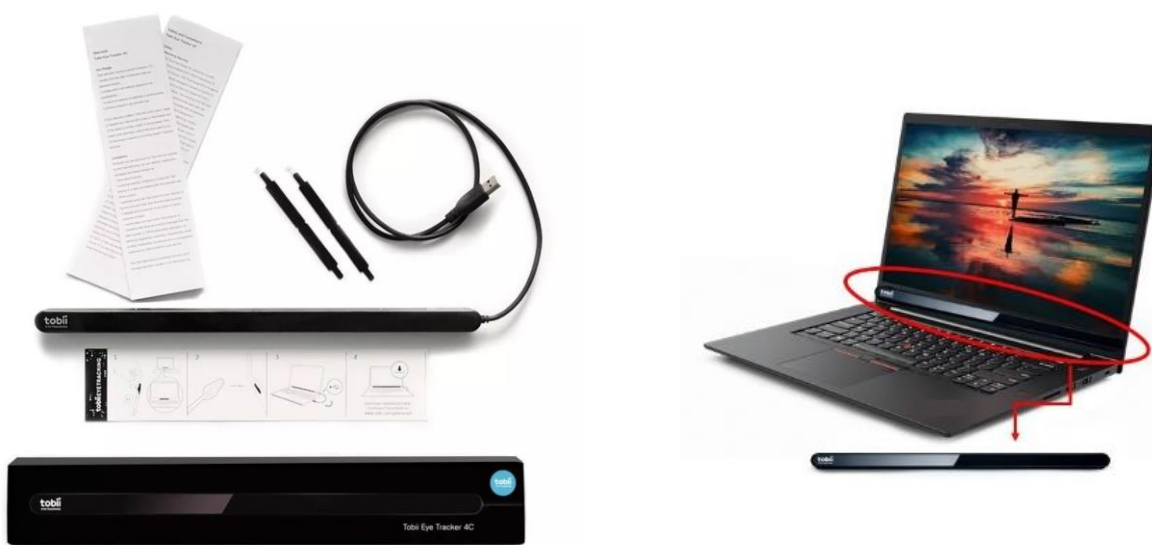

### **Novidade:**

Foi lançado em junho/2020 o novo **TOBII EYE TRACKER 5**, a próxima geração de rastreamento de cabeça e olhos.

A Associação Pró-Cura possui poucos aparelho dessa nova geração, mas o mecanismo é semelhante ao TOBII EYE TRACKER 4C. Abaixo damos informações que serve para ambos.

### **Descrição do Produto TOBII EYE TRACKER**

O TOBII EYE TRACKER é um pequeno aparelho que se prende à parte inferior da tela e se conecta ao seu computador via USB. **Ele rastreia os movimentos da cabeça e dos olhos para identificar onde o paciente está olhando na tela.** O TOBII EYE TRACKER junto ao programa OPTIKEY permite ao paciente com E.L.A. ter total controle das funções do computador como se estivesse usando teclado e mouse físicos.

### **Especificação aproximada do TOBII EYE TRACKER**

- Tamanho aparelho 1,5 x 1,5 x 30 cm (Largura x Altura x Comprimento)
- Tamanho caixa 9 x 40 x 5 cm (Largura x Altura x Comprimento)
- Peso 95 gramas
- Distância de operação (olhos até a tela) 50 - 95 cm

## Internet

É fundamental que o local tenha um **bom sinal de rede com boa velocidade de internet** e uma **conexão estável**.

## Descrição do OPTIKEY

O *software* OptiKey é um teclado virtual assistivo, desenvolvido por Julius Sweetland para interação com o Windows utilizando apenas os olhos. O Optkey foi projetado para ser utilizado com um dispositivo de rastreamento ocular de baixo custo, o TOBII EYE TRACKER por exemplo. Ele traz o controle do mouse, do teclado e, também, reproduz a fala, sendo indicado para pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) / Doença dos Neurônios Motores (DNM).

**Para usar o Optkey basta baixá-lo GRATUITAMENTE através do seu navegador e instalá-lo no seu notebook.** Para isso clique em Download na página do Optikey. Os links abaixo mostra um pouco a forma de uso.

<https://youtu.be/CkWBLHRYx94>

<https://youtu.be/HLkyORh7vKk>

## Configuração do Notebook para instalar um TOBII EYE TRACKER e o software OPTIKEY

- Tela de 15 polegadas ou maior (esse requisito é principalmente devido ao conforto do usuário)
- Processador CORE i7(ideal)
- Memória RAM 8G
- Windows 10
- É muito recomendável, se for possível, **usar SSD** pois é bem mais rápido para ler, carregar ou salvar arquivos

## Onde comprar TOBII EYE TRACKER no exterior

O Tobii Eye Tracker pode ser comprado em vários sites de vendas, como o próprio site da Tobii, o site da Amazon e outros.

## Onde comprar TOBII EYE TRACKER no Brasil

No Brasil o único local que já encontramos o Tobii Eye Tracker para ser comprado é no site do Mercado Livre.